

Installatie instructie

Theramon Cloud

ORTHOSMART B.V.
23 JANUARI 2019

Installatie instructie

Theramon Cloud

Inhoudsopgave

2. REGISTREREN BIJ THERAMON CLOUD	2
2.1 REGISTREREN NIEUWE GEBRUIKER.....	2
2.2 INSTALLEREN THERAMON CLIENT	4
2.3 OPHALEN ADRES EN ACCES CODE.....	7
2.4 INSTELLEN THERAMON AZURE CLIENT	9

Installatie instructie


Theramon Cloud

2. Registreren bij Theramon Cloud


2.1 Registreren nieuwe gebruiker

Als nieuwe gebruiker van de Theramon Cloud heeft u van Orthosmart een (nieuwe) licentie ontvangen voor het gebruik van de Cloud software. Met behulp van deze licentie kunt u een nieuwe gebruiker registreren in de Theramon cloud software. Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:

1. Start een internet browser (Firefox, Google Chrome, Edge)
2. Ga naar het volgende internet adres: <https://cloud.thera-mon.com/> en klik op New User / Registration om naar het registratie scherm te gaan.

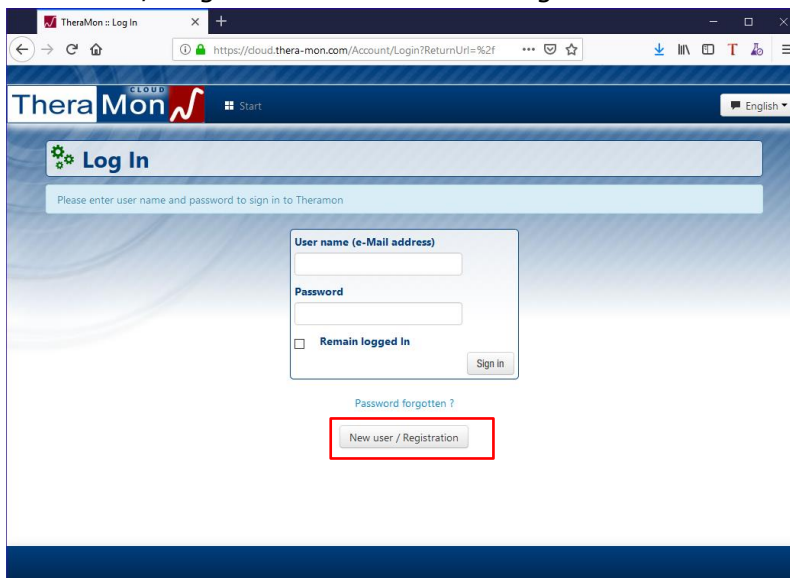


3. Voer de product key die u van Orthosmart ontvangen heeft in en klik op Next

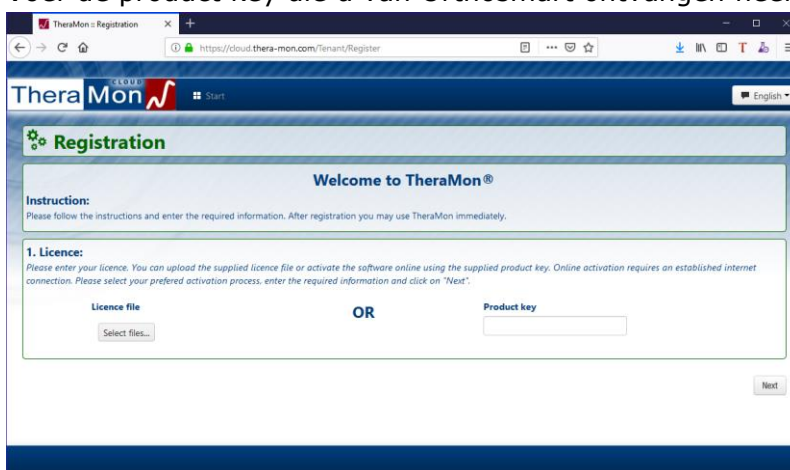

Installatie instructie


Theramon Cloud

4. U ziet nu de naam zoals die op de licentie is vastgelegd.

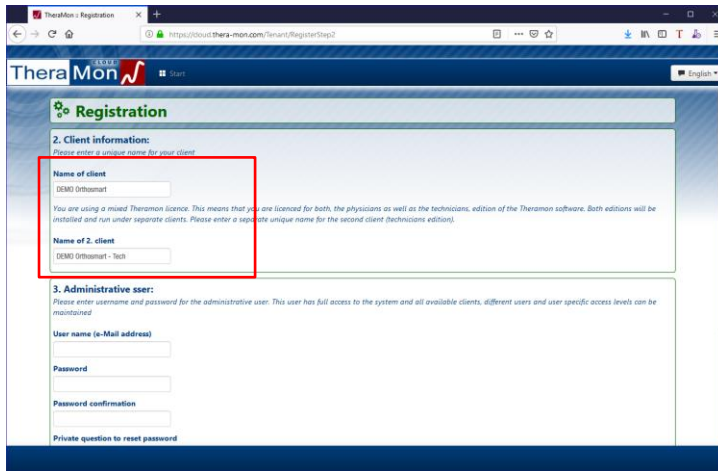


The screenshot shows the 'Registration' page for TheraMon. Under the heading '2. Client information', there are two text input fields. The first field, 'Name of client', contains the text 'DEMO Orthosmart' and is highlighted with a red rectangular box. The second field, 'Name of 2. client', contains the text 'DEMO Orthosmart - Tech'. Below these fields, there is a section for '3. Administrative user' with fields for 'User name (e-Mail address)', 'Password', 'Password confirmation', and a 'Private question to reset password'.

5. Vul de volgende gegevens in
- Emailadres voor uw gebruikersnaam
 - Wachtwoord 2x zodat wij zeker weten dat u uw wachtwoord goed heeft ingevuld.
6. Vul de gegevens aan met een beveiligingsvraag en antwoord. Deze zal u gesteld worden als u uw wachtwoord vergeten bent

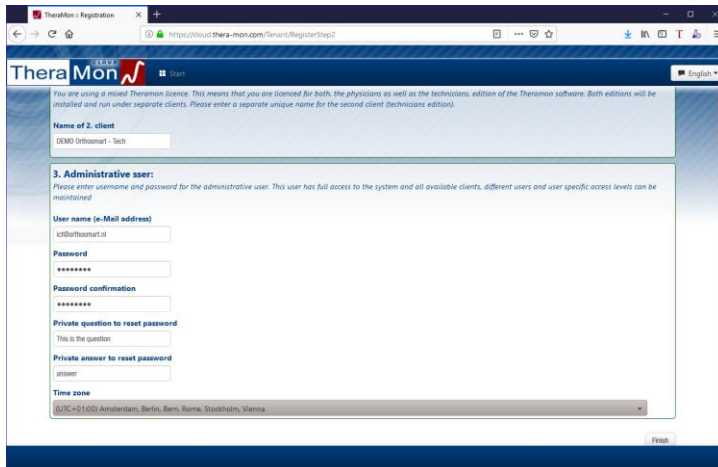

The screenshot shows the 'Registration' page for TheraMon, step 3: 'Administrative user'. The 'User name (e-Mail address)' field contains 'test@orthosmart.nl'. The 'Password' and 'Password confirmation' fields both contain '*****'. The 'Private question to reset password' field contains 'antwoord'. There is also a 'Private answer to reset password' field which is empty. At the bottom, there is a 'Time zone' dropdown menu set to '(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna' and a 'Finish' button.

7. Klik op finish om de registratie af te ronden. U bent nu meteen ingelogd in de Theramon Cloud.

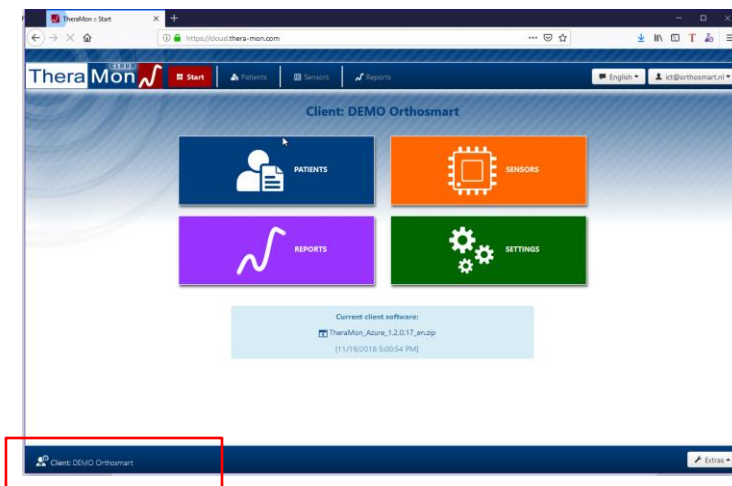

The screenshot shows the 'TheraMon Start' page. At the top, it says 'Client: DEMO Orthosmart'. Below this, there are four large buttons: 'PATIENTS' (blue), 'SENSORS' (orange), 'REPORTS' (purple), and 'SETTINGS' (green). Below the buttons, it says 'Current client software: TheraMon_Azure_1.2.0.17_an-app (11/18/2018 5:02:54 PM)'. At the bottom left, there is a 'Client: DEMO Orthosmart' label with a red box around it, and an 'Exit' button at the bottom right.

Installatie instructie Theramon Cloud | 23 Januari 2019


Installatie instructie

Theramon Cloud


2.2 Installeren Theramon Client

Voor het in de cloud kunnen opslaan van de gegevens die uitgelezen worden uit de chip moet de Theramon Client software (Theramon Azure) worden geïnstalleerd die u kunt downloaden als u bent ingelogd in de Cloud.

1. Start een internet browser (Firefox, Google Chrome, Edge)
2. Ga naar het volgende internet adres: <https://cloud.thera-mon.com/>
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in dat u bij paragraaf 2.1 heeft aangemaakt en klik op Sign in.

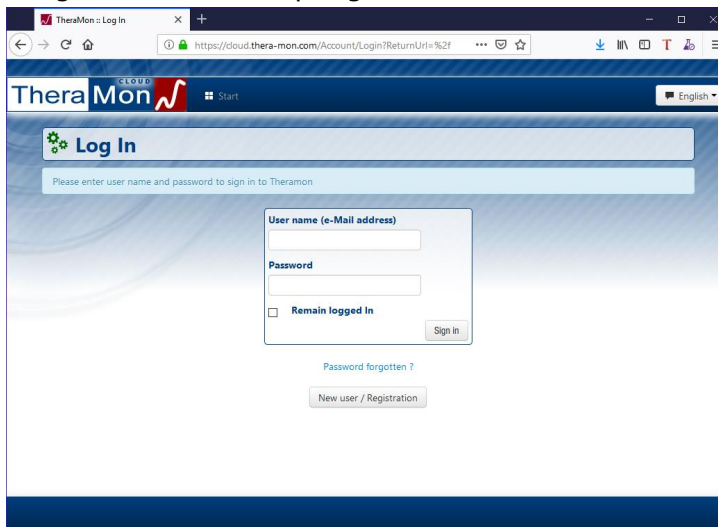

3. Na het inloggen krijgt u het hoofdscherm van de Theramon Cloud software te zien en kunt u de Theramon Client software downloaden.

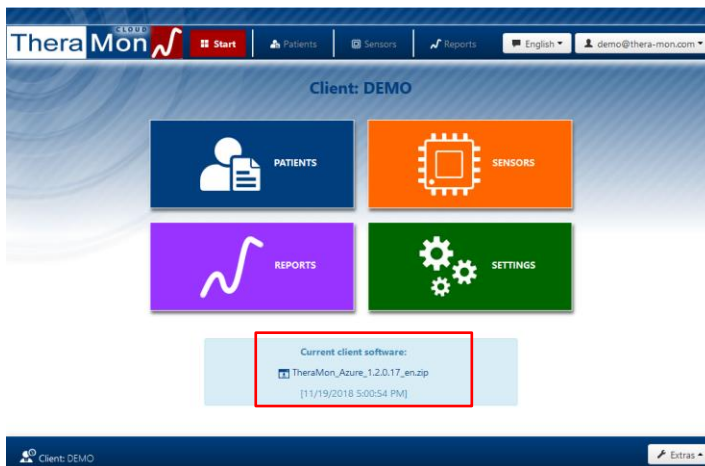


8. Na het downloaden van deze software kunt u de Theramon Client installeren
9. De installatie bestanden worden in een zogenaamd zip bestand gedownload en dat moet na downloaden eerst worden uitgepakt.

Installatie instructie


Theramon Cloud

10. Na het uitpakken dubbelklikt u op het programma setup.exe

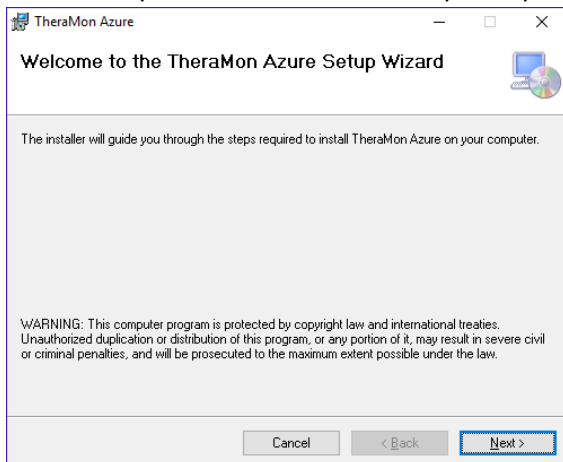

11. Klik op Volgende (Next)

12. Selecteer de Theramon Reader die u gebruikt en klik op volgende (Next)

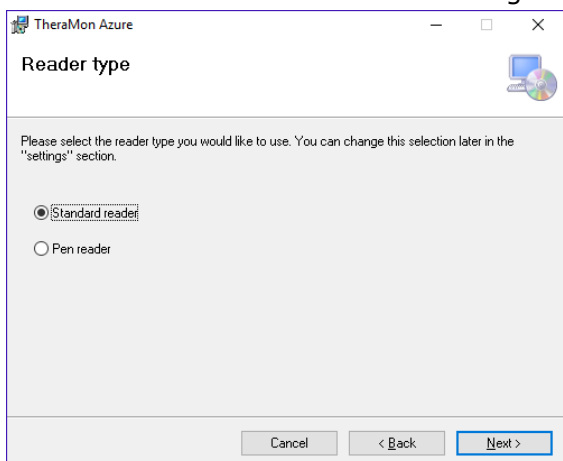

a. Kies standard reader voor oude reader




b. Kies Pen Reader voor onze nieuwe reader




Installatie instructie

Theramon Cloud


13. Kies de locatie waar de software geïnstalleerd moet worden en klik op volgende (Next)

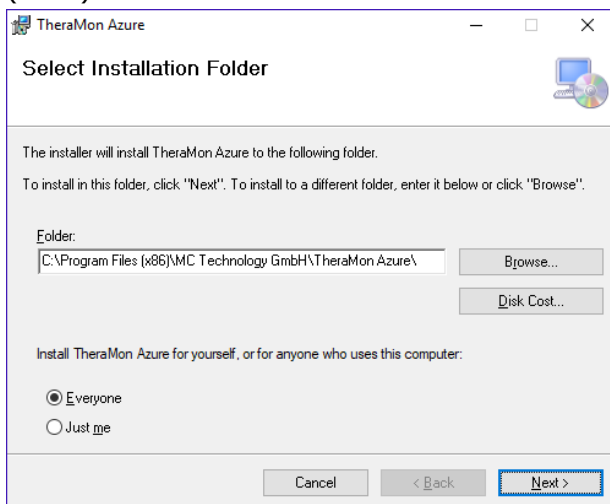

14. Klik op Volgende (Next) om de installatie uit te voeren

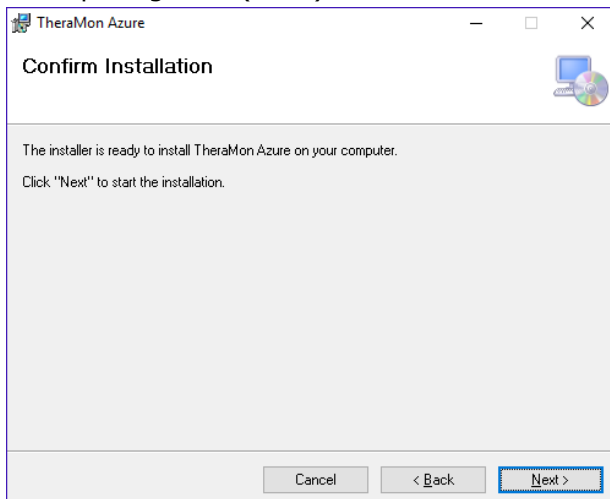


15. U krijgt nu een popup van windows te zien met de vraag of u de installatie wilt uitvoeren. Accepteer het uitvoeren van het programma
16. De installatie wordt nu uitgevoerd

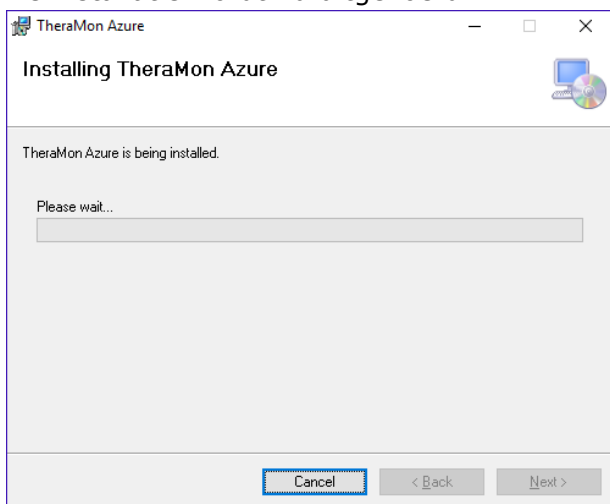

Installatie instructie

Theramon Cloud

17. Klik op sluiten (Close) om de installatie af te ronden

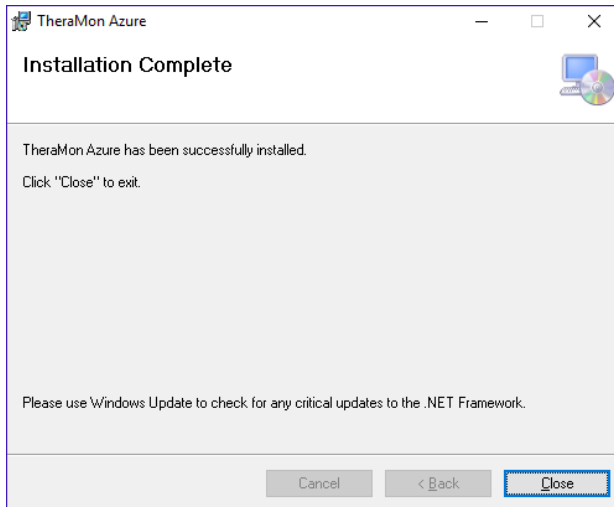


2.3 Ophalen Adres en Acces code

Voor het verbinden van de TheraMon Azure client met de TheraMon Cloud zijn de volgende gegevens nodig:

1. Adres
2. Access code

Deze gegevens kunt u op de volgende manier bekijken:


1. Start een internet browser (Firefox, Google Chrome, Edge)
2. Ga naar het volgende internet adres: <https://cloud.thera-mon.com/>
3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in dat u bij paragraaf 2.1 heeft aangemaakt en klik op Sign in.

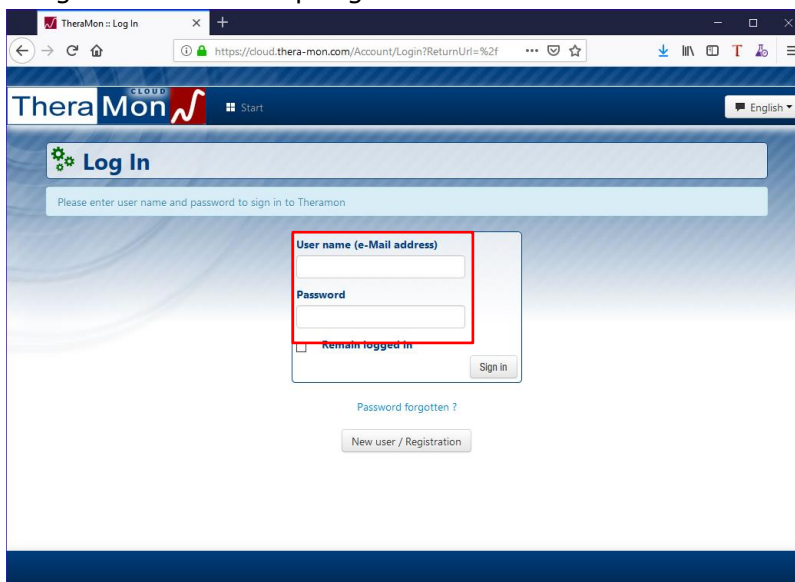


Installatie instructie

Theramon Cloud


4. Na het inloggen krijgt u het hoofdscherm van de Theramon Cloud software te zien. Klik op Settings om naar instellingen te gaan

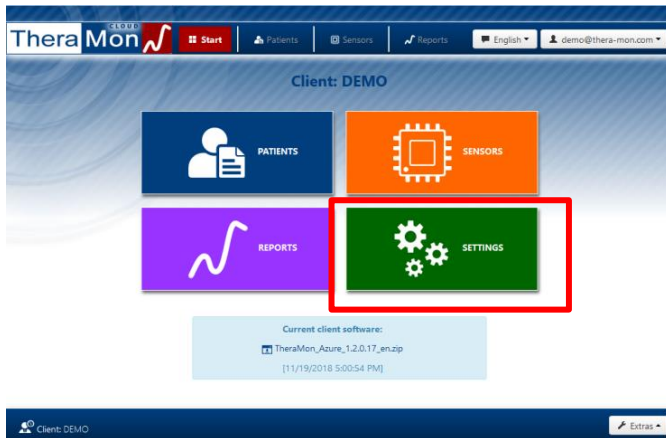

5. U krijgt nu het instellingen scherm te zien

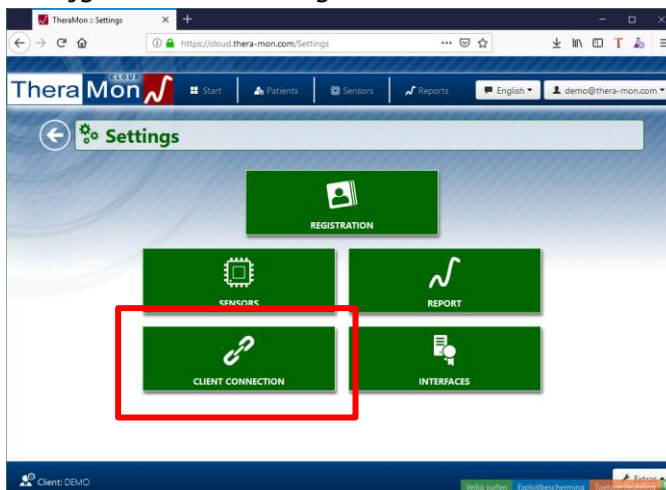

6. Klik op Client Connection om het adres en de access code te kunnen bekijken

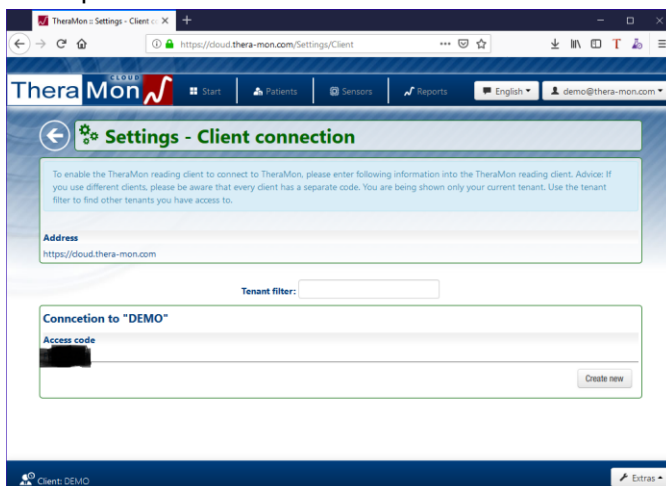

7. Leg het adres en Access code vast. Deze heeft u nodig als u de Theramon Azure Client voor de eerste keer opstart.


Installatie instructie

Theramon Cloud


2.4 Instellen Theramon Azure Client

Om de Theramon Azure Client samen te laten werken met de cloud versie van Theramon moeten enkele instellingen in de Theramon Azure Client worden gedaan:

1. Start de Theramon Azure software op
2. U krijgt nu een scherm te zien waar u de instellingen voor de Access data moet invullen

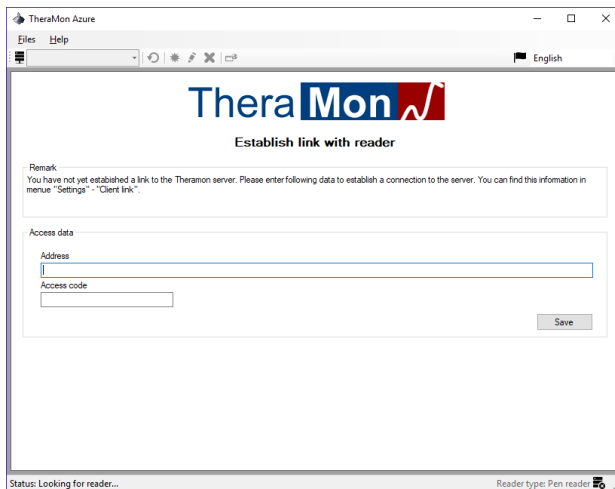

- a. Vul bij Address het volgende adres in: <https://cloud.thera-mon.com>
 - b. Vul de access code in die u in paragraaf 2.3 heeft vastgelegd.
3. Klik op save om de gegevens op te slaan
 4. U krijgt nu het Theramon Azure Client hoofdscherm te zien

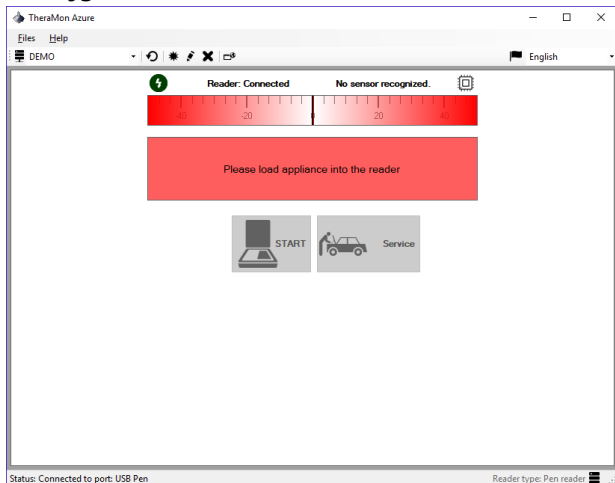

5. U kunt nu Chips uitlezen en waarna de gegevens automatisch in de cloud worden opgeslagen.

U bent nu klaar om Theramon Cloud te gaan gebruiken.